



pierre cardin
PARIS

**AKILLI VÜCUT
ANALİZ BASKÜLÜ**

PC-B30001



pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Özellikler

Taşıma kapasitesi: 3kg - 180kg

Birim: KG/LB

Voltaj: 4,5V

Pil: 3x AAA pil

Düşük pil göstergesi: ekranda "Lo" görüntülenir ve cihaz kapanır

Aşırı yük göstergesi: ekranda "OL" görüntülenir

En iyi çalışma sıcaklığı: 5-35°C

Depolama sıcaklığı: -10-60°C

AiLink Uygulaması

Anında ağırlık ölçümü

AiLink uygulamasını açın ve Bluetooth'u etkinleştirin.

Otomatik eşleştirme işlemi kendiliğinden tamamlanacaktır.

Tartıldığınızda ağırlık verileri uygulama ile senkronize edilecektir.

Bluetooth bağlantısının kesilmesi durumunda veriler baskülün belleğine kaydedilir ve Bluetooth yeniden bağlandığında uygulama ile senkronize edilir.

Mevcut ağırlık

Mevcut ağırlık arayüzü, kullanıcının ağırlık bilgilerini görüntüler ve kaydedilen ölçümlere dayalı olarak sağlık ipuçları içeren raporlar oluşturur.

Fonksiyon

Vücut ağırlığı, BMI, vücut yağ yüzdesi, kas oranı, nem, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı, protein oranı, vücut yaşı, iç organ yağ endeksi, deri altı yağ, standart ağırlık, kilo kontrolü, yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi, kas kütlesi, protein miktarı, obezite oranı

1.Adım

AiLink uygulamasını yükleyin


1. Bluetooth'u etkinleştirin.
2. Wifi veya 3G/4G/5G ağına bağlanın.
3. QR kodunu taramak için cihazınızı (tablet veya telefon) kullanın veya AppStore/Google Play'den AiLink'i arayın ve uygulamayı yükleyin.



2.Adım

Pilleri takın

1. Pil kapağını açın.
2. Pilleri belirtildiği gibi takın.
3. Pil kapağını kapatın.

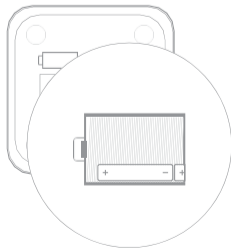

3.Adım

Kaydolun ve kullanıcı bilgilerinizi doldurun



4.Adım

Akıllı baskülü eşleştirin



5.Adım

Sonuçları görüntüleyin



Uyarı

1. Lütfen baskülü ıslak zeminli alanlardan uzak tutun. Yaralanmaları önlemek için baskülün üzerindeki cam ıslaksa baskülü kullanmayın.
2. Her zaman baskülün ortasında durun.
3. Baskülün üst kısmı camdan yapılmıştır. Yüzeyin çizilmemesine özen gösterin.
4. Baskül su geçirmez değildir. Kuru tutun ve asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
5. Yüzeyi temizlemek için yumuşak bir bez kullanın ve asla sert kimyasallar kullanmayın.
6. Akıllı Baskül tarafından gösterilen veriler yalnızca referans amaçlıdır ve tıbbi amaçlar için kullanılmamalıdır.