

pierre cardin
PARIS



**MINI MASAJ
ALETİ**

PC-M10002

pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat: 1.0.1.2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Cihaza Genel Bakış



Parça Listesi



Dört Masaj Başlığı İçin Şematik Diyagram




Cihazın Kullanımı

- Cihazın açılması / kapatılması
- Cihazı açmak için, açma/kapama düğmesini üç saniye basılı tutun.
- Cihazı kapatmak için, açma/kapama düğmesini üç saniye basılı tutun.
- Masaj kuvvetini ayarlamak için "+" düğmesine basın.
- Maksimum hız seviyesi, dokuzuncu seviyedir.
- Başlangıç hız seviyesi, en düşük seviyedir.



Not: Kemikleri ve kasları korumak için, hasara yol açabilecek şekilde uzun süre boyunca sabit bir noktaya masaj uygulamaktan kaçınınız.
Cihaz 15 dakika boyunca olarak sürekli çalıştırdıktan sonra, otomatik olarak duracaktır.


Masaj Başlığının Değiştirilmesi

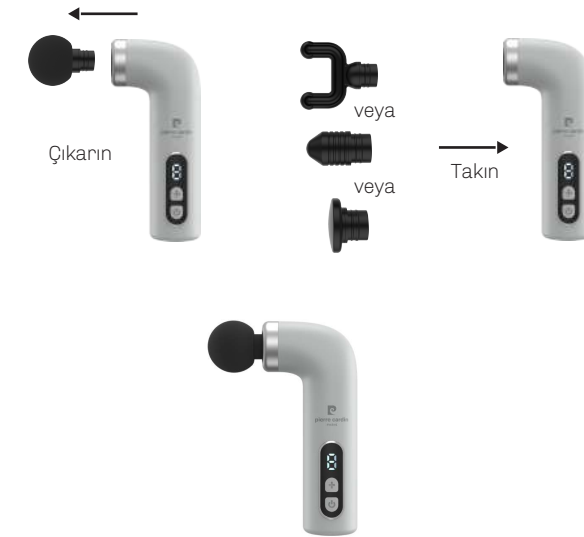

Takma işlemi tamamlanmıştır

Cihazın şarj edilmesi

Güç seviyesi %5'in altına düştüğünde, göstergesi yanıp sönecektir. Bu durumda, cihaz kısa süre içerisinde şarj edilmelidir.

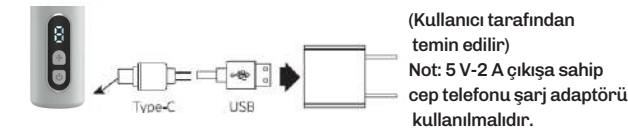

(Kullanıcı tarafından temin edilir)
Not: 5 V-2 A çıkışa sahip cep telefonu şarj adaptörü kullanılmalıdır.

- Lütfen ilk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
- Göstergesi ışığı şarj sırasında yanıp söner ve şarj işlemi tamamlandığında sürekli yanar.
- Şarj süresi yaklaşık 4 saattir.
- *Kullanım güvenliğini sağlamak için, şarj sırasında masaj aletini kullanmayın.
- *Batarya ömrünü korumak için, şarj işleminin tamamlanmasını bekleyin.

✓ Kullanım amaçları

- Kas ezilmesi, burkulması ve zorlanmasından kaynaklı ağrı ve spazmlar
- Şişlik durumunda dolaşıma yardımcı olunması
- Gevşek ve kalınlaşmış bağ dokusu ve fasya
- Kaslarda laktik asit birikiminin azaltılması
- Eklem hareketliliğinin artırılması
- Kas yorgunluğunun giderilmesi

⚠ Cihazı aşağıda belirtilen durumlarda ve aşağıda belirtilen bölgelerde kullanmayın:

- Anevrizma veya kanama durumunda ve kan sulandırıcı ilaçları kullanılması halinde
- Kalp pili veya defibrilatör kullanımı gerektiren kalp hastalıklarında
- Hamilelik, kanser
- Cihaz, internal fiksasyon işleminden sonraki 90 gün boyunca, internal fiksasyon gevresindeki 8 cm'lik (3 inç) alan içerisinde kullanılmamalıdır.
- Baş, yüz, servikal omurga ve vertebral vücut alanları gibi bölgelerde
- Tibia, ayak sırtı, el sırtı vb. gibi, kas dokusunun daha az olduğu, iskelete yakın konumlarda

Cihaz parametreleri
- Model: Mini Masaj Aleti
- Anma gerilimi: 7,4 V
- Anma akımı: 2 A
- Anma gücü: 30 W
- Giriş parametresi: 5 V
- Maksimum hız: 3200 dev./dk.
- Batarya kapasitesi: 1200 mAh